

Bell

Audiometro Diagnostico



L'orchestra perfetta

La linea completa per ORL e Audioprotesisti

- Audiometria a toni puri in AC e BC
- Display grafico a colori
- Memoria interna per 100 pazienti
- Hy-Tech: può essere azionato tramite il PC



TECNOLOGIA IBRIDA

Bell è dotato di Inventis Hy-Tech: è possibile decidere se farlo funzionare in modo tradizionale (modalità stand-alone) o controllarlo attraverso il computer.

NOAH & INTEGRAZIONE CON MAESTRO


Basta collegare Bell a una porta USB del computer (non sono necessari driver) e si possono trasferire i risultati dell'esame nel database Maestro o Noah. Con la funzione di visualizzazione dal vivo, è possibile avere un'ampia visione dell'esame in corso sul display del computer.

___ Bell è un audiometro di screening/diagnostico, in grado di eseguire esami di soglia rapidi e accurati in via aerea e ossea. Nonostante la comoda tastiera e l'ampio e luminoso display grafico a colori che permette di visualizzare l'audiogramma completo durante l'esame, Bell è estremamente compatto e leggero e facile da trasportare nella sua custodia dedicata.

I MODELLI

È disponibile in due configurazioni per soddisfare le diverse esigenze degli utenti:

- **Basic** (solo AC)
- **Plus** (AC & BC)

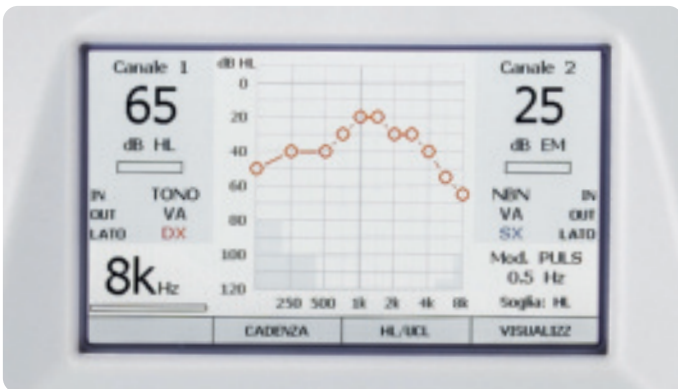

DATI TECNICI

AUDIOMETRIA

- Intensità: AC: da -10 a 120 dB HL
BC: da -10 a 80 dB HL (Plus)
- Gamma di frequenze: 125-8000 Hz
- Ingresso: Tono continuo, tono pulsato (0,5, 1 e 2 Hz), warble
- Mascheramento: WN (Plus), NBN
- Uscita: AC L+R, BC (Plus), inserire mascheramento (solo opz. Plus)
- Talk over: Microfono incorporato o esterno
- Batteria di test: PTA, HW soglia automatica

SPECIFICHE DEL DISPOSITIVO

- Memorizzazione dei dati: Memoria interna per 100 pazienti
- Tipo di display: Grafico a colori
- Dimensioni del display: 3.75 x 2.11 in / 480 x 272 pixel
- Lingua: Interfaccia multilingue
- Interfaccia PC: USB bidirezionale
- Modalità di funzionamento: Stand-alone e ibrido
- Sw compatibile: Inventis Maestro o Noah con modulo dedicato
- Dimensioni: 32 x 32 x 9 cm / 12,6 x 12,6 x 3,5 in (DxPxPx)
- Peso: Basic
senza stampante 1,82 kg / 4,01 lbs
Plus
senza stampante 1,89 kg / 4,17 lbs

Trovate i nostri distributori su:
www.inventisbiomedica.it

Scopri l'orchestra completa a: www.inventisbiomedica.it

