

Harp

Audiometro Diagnostico



L'orchestra perfetta

La linea completa per ORL e Audioprotesisti

- Audiometria tonale e vocale in VA, VO e FF
- Memoria interna per il materiale vocale (Plus)
- Test sovra-liminari
- Hy-Tech: può essere utilizzato attraverso il PC



MATERIALE VOCALE INCLUSO

Harp Inoltre è dotato di una memoria flash integrata di 4 GB per la memorizzazione del materiale vocale. Pulsanti dedicati permettono di accedere e riprodurre elenchi di parole precaricati con facilità. Lo schermo visualizza anche le parole attualmente pronunciate

INTEGRAZIONE NOAH & MAESTRO

Basta collegare Harp a una porta USB del computer (nessun driver necessario), ed è possibile trasferire i risultati degli esami nel database Maestro o Noah. Con la funzione "live view", si può avere un'ampia vista dell'esame in corso sul display del computer.

DATI TECNICI

AUDIOMETRIA

Intensità: VA: da -10 a 120 dB HL
 VO: da -10 a 80 dB HL
 Freq. intervallo: 125-8000 Hz
 Ingresso: Continuo, warble, EXT1, EXT2, Mic, memoria interna (solo versione Plus)
 Masking: NBN, WN, SN
 Resa: VA L + R, VO, FF L + R, masking insert
 Talk-over: Built-in o microfono esterno
 Monitor: Altoparlante incorporato o cuffie
 Batteria di test: Audiometria tonale e vocale, autothreshold, ABLB, SISI, Stenger, DLI, Tone Decay, MHA solo in Plus: (opz.) TEN Test (opz.), QuickSIN™

CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO

Archiviazione dati: Memoria interna per 100 pazienti
 Int. memoria flash: 4 GB (solo Plus)
 Tipo di display: Display a colori
 Dimensioni display / ris: .. 95 x 54 mm / 480 x 272 pixel
 Stampante: (Opz.) stampante termica integrata
 Lingua: Interfaccia multilingue
 Interfaccia PC: USB bidirezionale
 Modalità: Stand-alone e ibridi
 SW compatibile: Inventis Maestro (stand-alone o modulo Noah)
 Dimensioni: 32 x 32 x 9 cm
 12.6 x 12.6 x 3.5 in (PxLxA)
 Peso: senza stampante 1,85 kg / 4.08 lbs
 con stampante 2.48 kg / 5.47 lbs

___ Harp è un audiometro diagnostico avanzato, in grado di eseguire velocemente esami audiometrici in via aerea, ossea e in vocale, oltre a numerosi test aggiuntivi. Le caratteristiche di assoluto livello combinate con la facilità d'uso e portabilità rendono Harp la scelta ideale per una vasta gamma di utenti, dal distributore di apparecchi acustici agli audiologi, cliniche e ospedali.


TEST DISPONIBILI

Harp è disponibile in due configurazioni per soddisfare diverse esigenze degli utenti:

- **Basic**
- **Plus**

Oltre agli esami audiometrici standard, Harp esegue anche l'audiometria automatica Hughson-Westlake, Tone Decay, ABLB, SISI, Stenger, DLI, e il Master Hearing Aid a 2 canali.

TEN Test e QuickSIN™ sono disponibili solo su richiesta per il modello Plus.

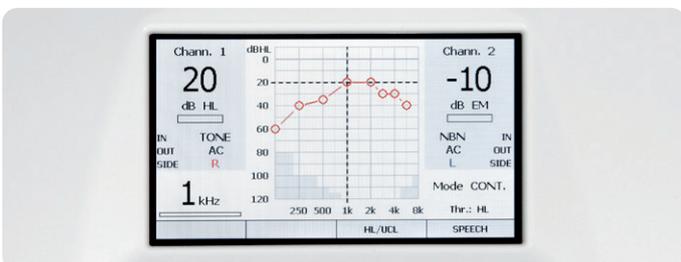

Trovate i nostri distributori su:
www.inventisbiomedica.it

Scopri l'orchestra completa a: www.inventisbiomedica.it

