




EF-N

NASOFARINGOSCOPIO FLESSIBILE

DESCRIZIONE

EF-N è un nasofaringoscopio flessibile a fibre ottiche di elevata qualità. Caratterizzato da un design ergonomico per una presa comoda e funzionale, è dotato di un controllo sensibile e robusto, e offre massima flessibilità e rigidità torsionale, adattandosi al meglio alla pratica clinica quotidiana. Il sistema ottico ad elevate prestazioni consente di acquisire immagini ampie, luminose e nitide, caratterizzate da un'elevata risoluzione: l'innovativa forma esagonale delle fibre ottiche permette infatti di eliminare gli spazi vuoti, conferendo alle immagini una luminosità eccezionale e un'alta definizione a 18.000 pixel.

EF-N è disponibile in tre modelli: **EF-N**, **EF-N SLIM** e **EF-N 14** (nasofaringoscopio operativo).

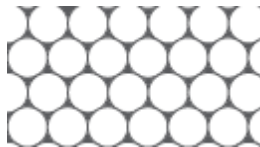

FIBRE TRADIZIONALI



FIBRE ESAGONALI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Diametro:**
 - **EF-N:** 3,4 mm
 - **EF-N SLIM:** 2,8 mm
 - **EF-N 14:** 4,0 mm
- **Diametro operativo per EF-N 14:** 1,4 mm
- **Lunghezza operativa:** 320 mm
- **Intervallo di deflessione:** $\pm 130^\circ$
- **Raggio di deflessione:** 8 mm
- **Direzione campo visivo:** 0°
- **Ampiezza campo visivo:** 85°
- **Profondità campo:** 1 - 50 mm
- **Movimenti distali:** 130° alto, 130° basso
- **Pulizia, disinfezione e sterilizzazione:**
 - Interamente immergibile in soluzioni per la pulizia e la disinfezione
 - STERIS®
 - ETO
 - Machine reprocessing (RDG-E)

ACCESSORI INCLUSI

- Adattatore tipo WOLF x 1
- Adattatore tipo STORZ x 1
- Tappo per la compensazione di pressione x 1
- Tester per la verifica della tenuta di pressione x 1
- Attacco per canale con luer-lock x 1 (solo per EF-N 14)
- Cappuccio di protezione per canale operativo x 1 (solo per EF-N 14)
- Tubo di risciacquo per canale operativo x 1 (solo per EF-N 14)
- Pinze per biopsia, diam. 1,0 mm, lunghezza 1200 mm x 1 (solo per EF-N 14)
- Spazzola morbida di pulizia, diam. 2,0 mm, lunghezza 1100 mm x 1 (solo per EF-N 14)
- Manuale utente
- Valigetta per trasporto (in plastica)

GUAINA MONOUSO (con codice di riferimento)

- **Codice 10630:** Guaina Endoshaft Cover per Xion EF-N x 50
- **Codice 10663:** Guaina Endoshaft Cover per Xion EF-N SLIM x 50

KIT PULIZIA FLESSIBILI (con codice di riferimento)

- **Codice 10608:** Kit Tristel Trio – Sistema di salviettine per la disinfezione delle ottiche
- **Codice 10671:** Kit Sterilizzante Medster 2000 – Confezione da 10 bustine 10g

CODICI PRODOTTO

Codice 10592: Nasofaringoscopio Xion EF-N

Codice 10661: Nasofaringoscopio Xion EF-N SLIM

Codice 11264: Nasofaringoscopio Xion EF-N 14, diam. 4.0 mm, canale operativo 1.4 mm, lunghezza 320 mm (non include il cavo luce)

CND: Z12021005

RDM: 362477

FABBRICANTE

Xion GmbH

Pank str. 8-10/S

13127 Berlino (Germania)