



EP/OAE CLINICO VERSATILE



AUDERA PRO

NUOVA GENERAZIONE

GSI AUDERA PRO EP/OAE COMPLETO

GSI Audera Pro™ rappresenta la nuova generazione del rinomato sistema clinico per potenziali evocati e OAE GSI Audera. Audera Pro offre una gamma completa di test che interessano i potenziali evocati (EP) e le emissioni otoacustiche (OAE). Audera Pro è dotato di tutte le funzionalità della versione precedente, ma offre in aggiunta una serie di aggiornamenti a supporto delle esigenze della moderna audiologia.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TIPI DI TEST


- ABR, ECoChG, MLR, LLR, SN10, P300/MMN, eABR, oVEMP, cVEMP
- ASSR: test binaurali, test simultaneo a 4 frequenze per orecchio
- DPOAE, TEOAE, OAE spontanee
- Stimoli: CE-Chirp, CE-Chirp a banda d'ottava, Parlato, Click, Tone Burst

HARDWARE

- Ingombro ridotto
- Preamplificatore integrato
- 3 opzioni di installazione, tra cui fissaggio a parete e su piadistallo
- Cavi paziente leggeri
- Sonda e tappini modello GSI Corti™

ANALISI DELLA FORMA D'ONDA

- ECoChG-Area e SP/AP
- Ponderazione bayesiana
- Filtri digitali
- Divisione della forma d'onda alternando componenti di rarefazione e compressione
- Correlazione incrociata delle forme d'onda
- Calcolo automatico del SNR (Rapporto Segnale/Rumore) e Rumore Residuo

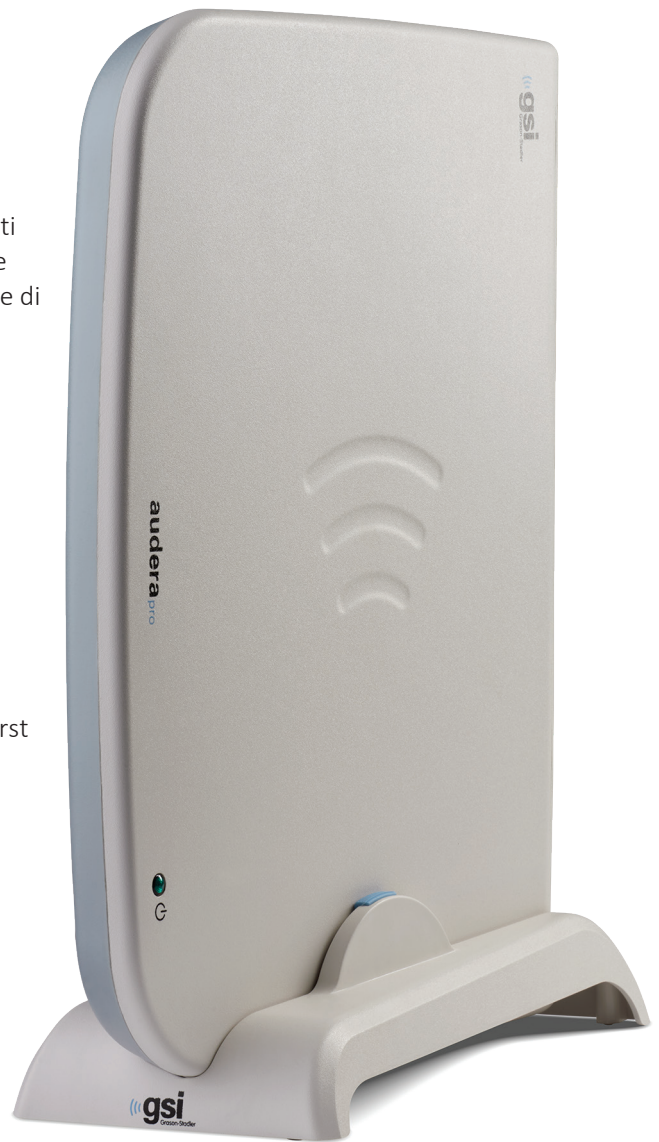

FUNZIONI PRINCIPALI

**VARIE OPZIONI DI
POSIZIONAMENTO**

**CORRELAZIONE
INCROCIATA**

**REGISTRAZIONE ATTIVA
DELLA DIVISIONE**

**FILTRAGGIO
DIGITALE**

**OPZIONE
STIMOLI**



**INGOMBRO
RIDOTTO**



3 VANTAGGI

PRINCIPALI

✓ MOLTEPLICI STRUMENTI DI ANALISI


Audera Pro comprende una vasta gamma di strumenti di analisi oggettiva, come ad esempio la correlazione incrociata di due forme d'onda, il Rapporto Segnale-Rumore in tempo reale (SNR) e le stime del Rumore Residuo (RN) per supportare il professionista nella convalida dei dati del test.

✓ ACQUISIZIONE DATI VELOCE E SICURA

I moduli di Audera Pro offrono protocolli e dati normativi predefiniti. Le opzioni su schermo consentono di eseguire modifiche in tempo reale. È possibile aggiungere protocolli personalizzati per soddisfare le esigenze di test individuali.

✓ MAGGIORE AMPIEZZA CON CE-CHIRP

Risparmia tempo e aumenta la sicurezza clinica utilizzando gli stimoli CE-Chirp e CE-Chirp banda d'ottava, che offrono ampiezze ABR fino a due volte superiori rispetto agli stimoli dei test tradizionali.

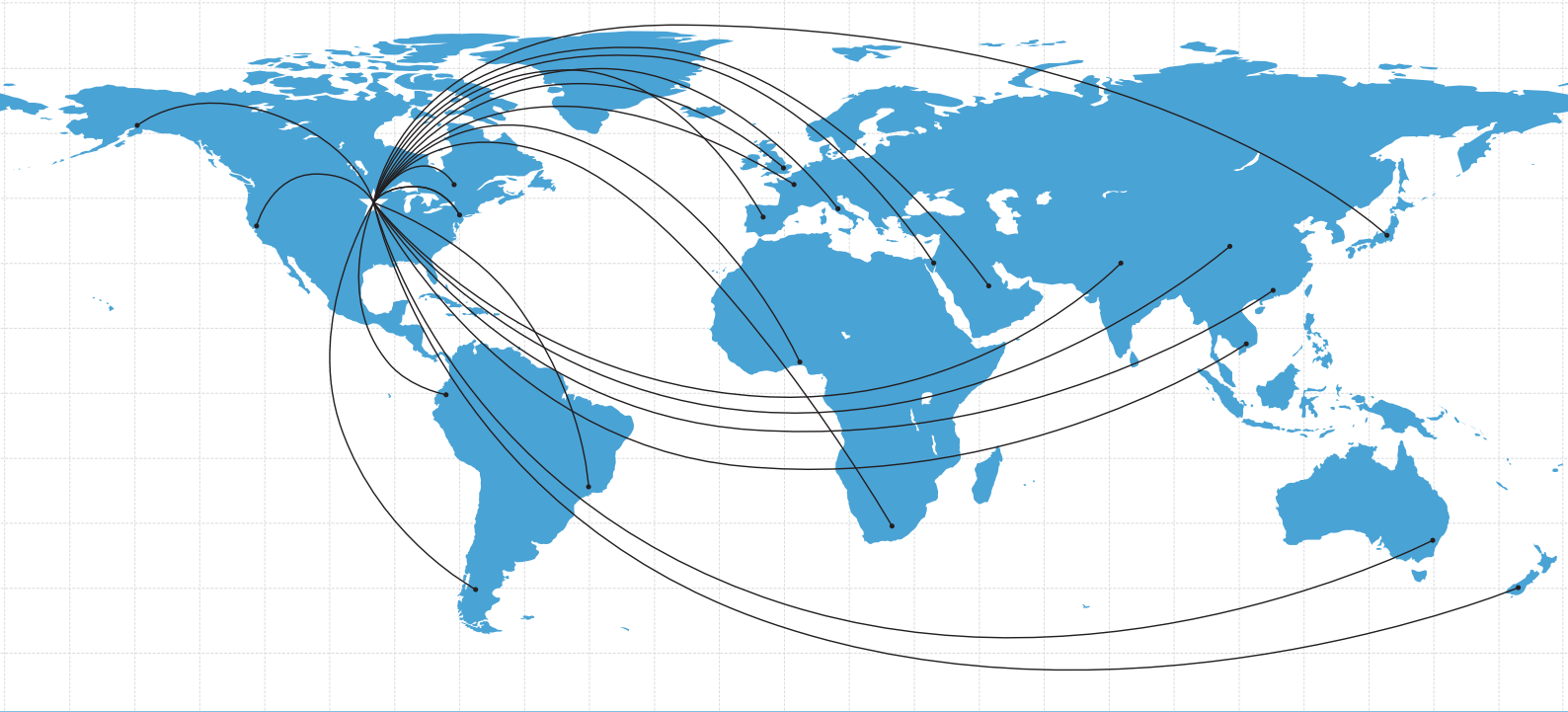

PIÙ DI 70 PAESI, PIÙ DI 100 SEDI

SIAMO SEMPRE CON VOI

Con una rete di distribuzione internazionale che include più di 100 sedi, GSI è in grado di fornire prodotti e assistenza ai professionisti dell'udito in oltre 70 Paesi. I nostri uffici impiegano solo personale esperto, preparato e certificato da GSI, sempre pronto a trovare la soluzione giusta per ogni esigenza.

GSI ha sviluppato efficaci collaborazioni strategiche con distributori e clienti. I partner GSI sono da sempre collaboratori partecipi all'attività dell'azienda e forniscono preziose indicazioni per lo sviluppo dei prodotti, suggerimenti per la formazione e per l'ottimizzazione delle procedure. GSI ha anche avviato un'importante collaborazione con centri di ricerca e formazione internazionali ed è orgogliosa di collaborare con fondazioni e università di spicco per la ricerca, le analisi e gli studi clinici.

DISTRIBUTORE LOCALE



Corso Stati Uniti, 1/3
35127 Padova
Italia

E-mail: vendite@inventis.it
Telefono: +39 049.8962.844
Sito web: www.inventis.it

INVENTIS è il distributore GSI esclusivo in Italia.

L'esperienza nella produzione e commercializzazione di dispositivi all'avanguardia per la diagnostica audiologica e dell'equilibrio permette a Inventis di fornire un servizio d'eccellenza per i prodotti GSI, servizio che va dalla consulenza sui dispositivi, all'installazione, all'assistenza e alla calibrazione.

Inventis fornirà un supporto e un affiancamento continuo nell'esperienza con GSI.